

# AIR-FLOW® PERIO

## PROPHYLAXIS POWDER

Before using this product, please carefully read and follow the recommendations of the instruction manuals originally delivered with your device and system. Please pay special attention to the safety precautions.

### Product Description

The AIR-FLOW® Perio (prophylaxis powder) is used for subgingival treatments.

This powder is for use in dentistry with the Hu-Friedy & EMS air polishing devices.

### Indications for use

The AIR-FLOW® Perio Prophylaxis Powder is indicated for use with EMS dental handpieces for cleaning and preparation of teeth.

### Contra-indications

- ⚠ Patients suffering from chronic bronchitis or asthma must not, under any circumstances, be treated with an air polishing device. The jet of air and powder could cause respiratory difficulties.
- ⚠ Predisposed persons may be sensitive to glycooll. If allergic reactions are observed, stop using the product and completely remove the powder from mouth.
- ⚠ Note that powder is provided non-sterile. Please take this information into consideration when performing procedures. The powder should only be used for non-surgical procedures.
- ⚠ The treatment of deep periodontal pockets can cause bacteraemia. Please apply appropriate restrictions for the treatment of risk patients (general weakened immunity, endocarditis).
- ⚠ Do not direct the jet of powder toward fillings, crowns or bridgework as this could damage these restorations.

### Recommendations for the treatment

- ⚠ Patient and user have to wear eye protection.
- ⚠ User has to wear a mask and gloves.
- ⚠ Use the high-speed evacuator of your dental unit.
- ✋ Calculi and tartar cannot be removed with this powder.
- ✋ Apply Vaseline® on the patient's lips.
- ✋ Wash hands after use.
- ✋ Wash patient face after use (e.g. with a wet wipes).

### General information

- Do not exceed the powder filling limit as indicated on the container.
- This powder is sugar free.

### Storage and shelf-life

- The powder should not be stored near heat sources.
- Storage condition up to 25°C and 10% to 90% relative humidity.
- Transport conditions -29°C to 38°C and 10% to 90% relative humidity
- Do not use after expiration date.

### Also available:

- AIR-FLOW® CLASSIC available in Lemon, Mint, Cassis, Cherry, Tropical and Neutral (for supragingival treatments).
- AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT (for supragingival treatments).
- AIR-FLOW® SOFT (salt free for supragingival treatments).
- AIR-FLOW® PLUS (salt free for subgingival and supragingival treatments).

### Powder composition :

- Glycine
- Amorphous Silica

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement et respecter les recommandations contenues dans les manuels d'instruction livrés avec l'appareil et le système. Respectez en particulier les remarques concernant la sécurité.

### Description du produit

L'AIR-FLOW® Perio (poudre prophylactique) est employé pour des traitements sous-gingivaux.

Cette poudre est utilisée en dentisterie avec un appareil aéropolisseur Hu-Friedy & EMS.

### Indications d'utilisation

L'AIR-FLOW® Perio (poudre prophylactique) est indiquée pour une utilisation avec les pièces à mains dentaires EMS, pour le nettoyage et la préparation des dents.

### Contre-indications

- ⚠ Les patients souffrant de bronchite chronique ou d'asthme ne doivent pas, en aucune circonstance, être traités avec un appareil aéropolisseur. Le jet d'air et de poudre pourrait provoquer des difficultés respiratoire.
- ⚠ Des personnes prédisposées peuvent être sensible au glycooll. Si des réactions allergiques se manifestent, cesser l'utilisation et enlever complètement la poudre de la bouche.
- ⚠ Noter que la poudre est fournie non-stérile. Veuillez prendre cette information en compte en exécutant des procédures. La poudre devrait seulement être employée pour des procédures non-chirurgicales.
- ⚠ Le traitement de poches parodontales profondes peut provoquer une bactériémie. Veuillez tenir compte des restrictions concernant le traitement de patients à risques (déficience immunitaire générale, endocardite).
- ⚠ Ne pas diriger le jet de poudre vers une obturation, une couronne ou un bridge car cela pourrait endommager ces restaurations.

### Recommandations pour le traitement

- ⚠ Patient et utilisateur doivent porter des lunettes de protection.
- ⚠ L'utilisateur doit mettre un masque de protection et des gants.
- ✋ Utiliser la grosse canule d'aspiration de votre unité dentaire.
- ✋ Calcul et tartre ne peuvent pas être éliminé par cette poudre.
- ✋ Appliquer de la Vaseline® sur les lèvres du patient.
- ✋ Laver les mains après utilisation.
- ✋ Laver le visage du patient après utilisation (ex. avec une lingette).

### Informations générales

- Ne pas remplir le réservoir au-dessus de la limite indiquée.
- Cette poudre est sans sucre.

### Entreposage et conservation



- La poudre ne doit pas être stockée à proximité de sources de chaleur.
- Conditions de stockage jusqu'à 25°C et 10% à 90% d'humidité relative.
- Conditions de transport de -29°C jusqu'à 38°C et 10% à 90% d'humidité relative.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.

### Egalement disponible:

- AIR-FLOW® CLASSIC disponible en Lemon (Citron), Mint (Menthe), Cassis, Cherry (Cerise), Tropical et Neutral (Neutre) (pour traitements supra-gingivaux).
- AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT (pour traitements supra-gingivaux).
- AIR-FLOW® SOFT (sans sel pour traitements supra-gingivaux).
- AIR-FLOW® PLUS (sans sel pour traitements sous-gingivaux et supra-gingivaux).

### Composition de la poudre :

- Glycine
- Silice amorphe

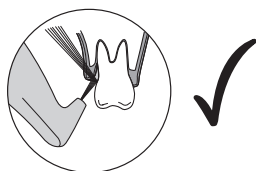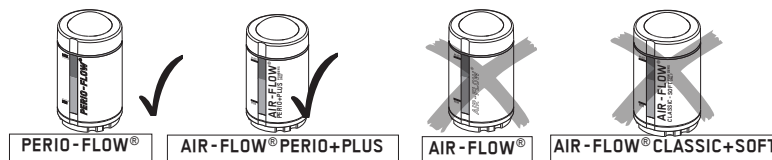











✋ Note that the English version of this instruction is the master from which translations derive. In case of any discrepancy, the binding version is the English text.

✋ Les traductions dans ce manuel sont basées sur sa version anglaise. Ainsi le texte en anglais fera référence en cas de divergence.

**Rx ONLY** Caution! Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

**Hu-Friedy**  **EMS** 



	Symbols	Symboles
	Manufacturer's logo	Logo du fabricant
	Distributor's logo	Logo du distributeur
	Manufacturer	Fabricant
	Catalog reference	Référence catalogue
	Lot number	Numéro de lot
	Expiry date	Date de péremption
	Temperature limitation	Limite de température
	Humidity limitation	Limite d'humidité
	Read the instructions	Lire les instructions
	Shake before use	Secouer avant utilisation